



1. General: **Aparato para modelar eléctrico**
Potenzia muy eficaz – Temperatura de punta (PKT 2) hasta 225°C

a. Artículo:

pro Waxer duo 230 Volt Art.No.: 414-0000
pro Waxer duo 115 Volt Art.No.: 414-0115

pro Waxer Art.No.: 412-0000
pro Waxer Art.No.: 412-0115

1.2. Forma de suministro:

- 1 pro Waxer duo con display digital
- 2 piezas de mano + cable de conexión
- 2 puntas para modelar PKT 1 + 2
- 2 pinzas para un posicionamiento
seguro de la pieza de mano

- 1 pro Waxer con display digital
- 1 pieza de mano + cable de conexión
- 1 punta para modelar PKT 2
- 1 pinza

1.3. Dirección del fabricante: **YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen, Alemania**
Tel.: 0049 7733-9410-0 FAX: 0049 7733-9410-22
www.yeti-dental.com info@yeti-dental.com www.dentalwax.com

1.4. Anotaciones de la marca depositada: DGBM 9403622.5

1.5. Datos técnicos:

voltaje :	230V +/- 10%	I 115V
frecuencia:	AC 50Hz/60Hz	I AC 50/60Hz
conexión/enchufe:	Schuko / aleman	I US Schuko
potencia absorbida:	15/18VA	I 15/18VA
fusible:	400mA	I 400mA
protección de seguridad:	isolación protectora	I isolación protectora

1.6. Condiciones para la colocación o depósito:

- colocar horizontalmente
- depósito seco a temperatura de ambiente
- proteger ante contacto con ácidos y lejías

2. Modo de empleo:

Nuestras espátulas electricas Waxer deben de ser utilizadas solamente para el trabajo con cera de modelar para odontotécnica. **No usar jamás en la boca del paciente.** En el caso de utilización contra estas normas no asumimos ninguna garantía o responsabilidad por eventuales daños.

3. Riesgos y peligros durante el uso:


1. Asegurese que personas indebidas (por ejemplo niños) no tengan contacto con el aparato que debe de ser utilizado solamente por odontotécnicos o personal instruido autorizado. Antes de poner en uso el Waxer leer atentamente las instrucciones de uso. En caso de preguntas o dudas contacte a su fabricante.
2. Usar el aparato solamente en lugares de trabajo secos; limpiar solo en seco y no meter jamás en recipientes con agua.
3. Tenga cuidado de no quemarse al tocar las puntas de modelar o la barra calentadora.
4. No cubrir las ranuras de ventilación del aparato.
5. Cualquier manipulación del aparato, de la pieza de mano o de la punta se efectuan exclusivamente bajo la responsabilidad del operador.
6. El aparato solamente puede ser abierto por personal calificado. Utilizar solamente piezas de repuesto indicadas por el fabricante. En caso contrario **pierde la garantía y no asumimos ninguna responsabilidad.**
7. Antes de cualquier intervento o apertura del aparato quitar el enchufe de la red.
8. No desenchufar tirando del cable.
9. Para la limpieza del aparato no usar disolventes.
10. En caso de envío (por ejemplo para reparación) asegurar embalaje de modo perfecto para evitar daños de transporte.

4. Instrucciones de uso:

4.1. Advertencias antes de poner en función:

Nuestras espátulas eléctricas Waxer han sido producidas según los últimos conocimientos técnicos y corresponden perfectamente a las normas de seguridad, no obstante pueden surgir peligros en caso de uso no debido a las normas.

- El aparato solamente puede ser usado en perfecto estado, observando de modo preciso las instrucciones de uso.
- Prestar atención a las reglas de seguridad.
- El aparato solamente puede ser usado por personas cualificadas.
- Comprobar que el aparato y sobre todo el cable de la corriente estén en estado perfecto.
- Colocar la(s) punta(s) necesaria(s) para los próximos procedimientos sobre la barra calentadora en la pieza de mano.
- Posicionar la pieza de mano con atención en modo seguro y estable, sin peligro de quemaduras para otros objetos y materiales.

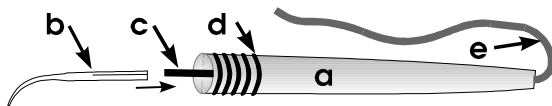

a – pieza de mano **b** – punta para modelar **c** – barra calentadora
d – anillos de goma antiresbalo **e** – cable de pieza de mano

4.2. Puesta en funcionamiento:

1. Meter el enchufe (recuede solamente a los enchufes de corriente permitidos, vea punto 1.5.) y enchufar las piezas de mano en la parte trasera del aparato.
2. Encender el aparato – el botón para encender la espátula se encuentra en la parte trasera del aparato.
3. Elejir la temperatura deseada a través del boton. Con el pro Waxer duo elija por primero la pieza de mano izquierda o derecha con el regulador (en el medio).
4. La temperatura es indicada en °C sobre el display. El tiempo de calentamiento depende de la grosura de la punta de modelación.

Importante: Cuanto mejor el contacto entre la barra calentadora (c) y la punta para modelar (b) tanto mejor la potencia de la punta.

La limpieza de la barra calentadora varias veces al año puede mejorar la temperatura de la punta hasta un 25%!

5. Coger la cera con la punta caliente y colocar la gota de cera en la corona de cera.
6. Para cambiar las puntas utilizar herramientas adecuadas – peligro de quemaduras!
7. Si no se utiliza el aparato por un periodo largo se aconseja de apagarlo y de insertar siempre la pieza de mano en la pinza – peligro de quemaduras!
8. Cuando deje el puesto de trabajo apage el aparato – peligro de quemaduras!
9. Para embalar o almacenar el aparato se ruega de hacerlo después de dejar que se enfrie completamente.

5. Eliminación: Para su eliminación respete las leyes y normas respectivas vigentes.
Si decide reenviar el aparato al fabricante debe de elegir el transporte más economico e informar al fabricante antes de ello.

6. Garantía: **La garantía de nuestros aparatos es de 24 meses desde la fecha de compra!**
Descartados estan piezas de desgaste como las piezas de mano y las puntas de modelación.

7. Reparación: En general tiene que enviar el aparato y las piezas de mano para la reparación. Pruebe la pieza de mano antes de enviarla, enchufando la segunda pieza de mano como contraprueba. Así no tiene que enviarlo para la reparatura.

8. Piezas de recambio y accesorios:

Nuestro surtido en puntas de izquierda a derecha:

411-0100 PKT1 fina

411-0200 PKT 2

411-0300 Hollenback

411-0400 Forma de cuchillo


411-0500 Forma de descorchador, fina

411-0600 Forma de descorchador, gruesa

411-1002 Pinza para pieza de mano

411-1001 Pieza de mano para Waxer NT, light Waxer y
pro Waxer con conexión a un polo (enchufe uniforme)

411-1000 Pieza de mano para pro Waxer con conexión
angulada a 5-polos

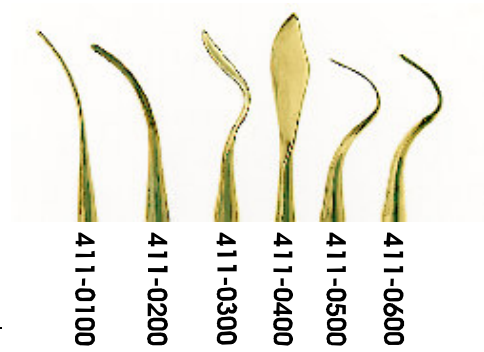

Anillos de goma para la pieza de mano:

411-2000 Anillos S negros para la pieza de mano 411-1000

411-3000 Anillos S negros para la pieza de mano 411-1001